

快適な車椅子ライフの必需品!

LapStacker® Flex

ラップスタッカー フレックス

車椅子で荷物を運べる

素早く荷物を固定
自動巻取り式ストラップ

ガーデニングやショッピング、料理の時など、あらゆる場面で便利に役に立っています。ラップスタッカーのおかげで、車椅子生活が変わりました！

レベッカ ロドリー

世界初

車椅子用 格納型キャリーシステム

必要な時にサッと取り出し使ったら自動で巻き取り



引いて



つなげて



行くだけ

⑤ 軽い! (約300g)

大幅に軽くなって、あなたの車椅子のパフォーマンスを邪魔しません。

⑤ 取り付け簡単

工具なしで5分で取り付け

⑤ 調整可能

座幅30cm~56cmまで対応します。

⑤ マグネットバックル

バックルは簡単に、素早く魔法のようにカチッとハマります。

⑤ フィンガーループ

ストラップの先端は、指を通しやすいループ形状になっています。

⑤ 自動巻取り式ストラップベルト

1.2mの自動巻取りストラップで便利

LapStacker® Flex
の付け方



Made with love by

≥adaptdefy®

取り付け簡単！ほとんどの車椅子に取り付けできます

クイックフィッティングガイド

LapStacker Flexは、調整式で様々な車椅子に取り付けることができます。このガイドを利用してお使いの車椅子への取り付け方法と必要なクリアランスをご確認ください。

・リジッドタイプ車椅子の場合



左右のフレームへ取り付け
ラップスタッカーフレックスを、左右のフレームにベルトで取り付けます。ベルクロテープでホルダーを固定します。



座面の上下にベルトで固定
上部取り付け用ベルトは座面の上を通します。スペースがあるか確認してください。



取り付けに必要なスペース
わずか幅47mmがあれば取り付けられます。ブレーキや干渉する部品を動かす必要がある場合があります。

・折り畳み式車椅子の場合



左右のフレームへ取り付け
左右のフレームにベルトで取り付けます。ベルクロテープでホルダーを固定するので、そのまま折り畳めます。



座面下にベルトで固定
取り付け用ベルトは座面の下を通ります。スペースがあるか確認してください。



取り付けに必要なスペース
僅か幅47mmがあれば取り付けられます。ブレーキや干渉する部品を動かす必要がある場合があります。


・折り畳み式車椅子の場合(デュアルフレーム)



上下方向への取り付け
垂直方向のフレーム同士に取り付けることもできます。



上下のフレーム間にベルトで固定
上下のフレーム間にスペースがあるか確認してください。

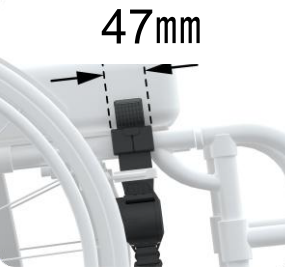

取り付けに必要なスペース
僅か幅47mmがあれば取り付けられます。ブレーキや干渉する部品を動かす必要がある場合があります。

・その他の車椅子には・・・

ラップスタッカーフレックスは、その他の車椅子にも必要なクリアランスがあれば取り付けられます。WHILLや電動車椅子、オフロードチェア、Panthera-Xなどの複雑なフレーム設計の車椅子でテストされています。

その他の取り付け情報や適応については、インストールガイドをご確認ください。

インストールガイドをご覧ください

取り付け方法は、インストールガイドをご覧ください。正規販売店では、日本語のインストールガイドをご用意しております。

LapStacker 販売店
381-4102 長野県長野市戸隠豊岡10356-1
合同会社 nicomo (ニコモ)
✉ rec@nicomo-llc.com